


TR **TURNİKE SETİ**
Kullanma Kılavuzu

EN **TOURNIQUET SET**
Instructions For Use

REF: 330 05XX 1
330 08XX 1
330 06XX 1
330 07XX 1

CE 0044

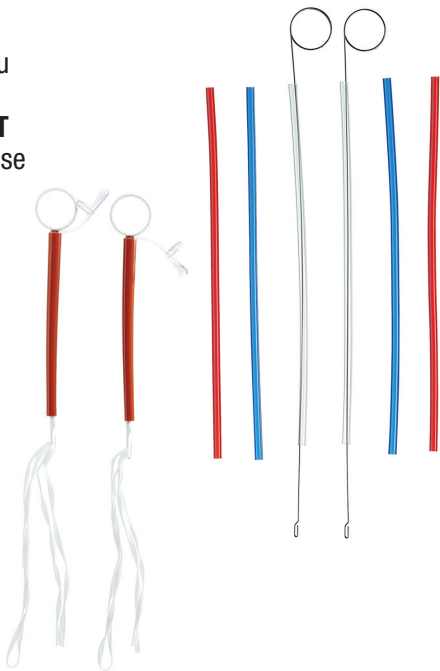

SCAN FOR INFO



1. Tanım

Turnike Seti, 2 farklı modeli bulunan steril ve tek kullanımlık tıbbi cihazdır. KANÜLASYON TURNİKE SETİ tel ve tüpten oluşmaktadır. Bir kanülü sabitlemek için kullanılır. VASKÜLER TURNİKE SETİ tel, tüp ve cerrahi örgülü banttan oluşur. Bir damardan akışı sınırlamak veya kesmek için kullanılır.

2. Sorumluluk Reddi

TURNİKE SETİ kullanım talimatlarında belirtilenler dışında kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Deneyimsizlik veya yanlış kullanımdan kaynaklanan sorunlardan üretici sorumlu değildir.

3. Teknik Özellikler

Kırmızı ve mavi renkli tüpler, ham maddenin radyoopak özelliği nedeniyle X ışınlarıyla tespit edilebilir.

Referans	Ölçüler	Turnike Tipi	Radyo-Opak Özellik	Tel	Tüp (adet x renk)
330 0510 1	Tüp çapı: 3.0x4.1 mm Tüp uzunluğu: 18 cm Tel uzunluğu: 25 cm	Kanülasyon	Evet	2	4 x KIRMIZI, 2 x MAVİ, 2 x ŞEFFAF
330 0511 1			Evet	1	1 x KIRMIZI, 1 x MAVİ, 3 x ŞEFFAF
330 0512 1			Evet	2	1 x KIRMIZI, 2 x MAVİ, 5 x ŞEFFAF
330 0513 1			Evet	1	1 x KIRMIZI, 2 x MAVİ, 3 x ŞEFFAF
330 0514 1			Evet	1	5 x KIRMIZI
330 0515 1			Evet	2	2 x KIRMIZI, 2 x MAVİ, 4 x ŞEFFAF
330 0516 1			Evet	1	2 x KIRMIZI, 1 x MAVİ
330 0517 1			Evet	1	3 x ŞEFFAF
330 0518 1			Evet	1	1 x KIRMIZI, 1 x MAVİ
330 0519 1			Evet	1	2 x KIRMIZI, 2 x MAVİ, 1 x ŞEFFAF
330 0520 1			Evet	1	2 x KIRMIZI, 2 x BLUE
330 0521 1			Evet	1	2 x KIRMIZI, 2 x MAVİ, 2 ŞEFFAF
330 0531 1	Tüp çapı: 3.0x4.1 mm Tüp uzunluğu: 12.5 cm	Kanülasyon	Evet	2	1 x KIRMIZI, 3 x ŞEFFAF, 2 MAVİ
330 0532 1	Tel uzunluğu: 18 cm		Evet	1	1x KIRMIZI, 2x MAVİ, 3x ŞEFFAF
330 0541 1	Tüp çapı: 3.0x4.1 mm ve 4.0x5.0 mm Tüp uzunluğu: 18 cm		Evet	2	2 x KIRMIZI, 2 x MAVİ, 4 x ŞEFFAF
330 0542 1	Tüp çapı: 4.0x5.0 mm Tüp uzunluğu: 18 cm Tel uzunluğu: 25 cm		Hayır	1	3 x ŞEFFAF
330 0543 1	Tüp çapı: 3.6x5.33 mm Tüp uzunluğu: 18 cm		Hayır	-	4 x ŞEFFAF
330 0544 1	Tüp çapı: 3.0x4.1 mm ve 4.0x5.0 mm Tüp uzunluğu: 18 cm		Hayır	-	8 x ŞEFFAF
330 0610 1	Tüp çapı: 4.8x6.8 mm Tüp uzunluğu: 12.5 cm		Hayır	-	5 x ŞEFFAF
330 0710 1	Tüp çapı: 3.0x4.1 mm Tüp uzunluğu: 18 cm Tel uzunluğu: 25 cm		Evet	2	2 x KIRMIZI, 4 x ŞEFFAF, 2 x MAVİ
330 0590 1	Tüp uzunluğu: 13 cm	Vasküler	Hayır	-	2 x TÜP
330 0591 1			Hayır	1	1 x TÜP
330 0592 1			Hayır	1	5 x TÜP
330 0593 1			Hayır	-	1 x TÜP
330 0594 1			Hayır	-	5 x TÜP
330 0841 1	Tüp çapı: 4.8x6.8 mm Tüp uzunluğu: 15 cm	Kanülasyon	Hayır	-	5 x ŞEFFAF

4. Çalışma Mekanizması

TURNİKE SET Çevresel basınç uygulayarak, alttaki dokuları ve kan damarlarını sıkıştırarak kan akışını kontrol eder. Bu basınç, arterleri ve damarları tıkar ve turnikenin distalindeki bölgeye kan akışını etkili bir şekilde durdurur.

5. Kullanım Amacı

VASKÜLER TURNİKE SET bir kanülü sabitlemek veya bir damardan akışı sınırlamak veya kesmek için cerrahi bir prosedürde kullanılır.

KANÜLASYON TURNİKE SET kardiyopulmoner baypas ameliyatlarında bu damar içindeki bir kanülü sabitlemek için kullanılır.

6. Hedef Kullanıcı

Bu ürün, uzman hekimler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Doğru cerrahi prosedür ve tekniğin uygulanması, tedaviyi yürüten tıp uzmanının (hekim) sorumluluğundadır. Bu kılavuz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Her hekim, tıbbi eğitimi, deneyimi ve uygulanan cerrahi prosedürün türüne göre, bu cihazın uygun kullanımını vaka bazında değerlendirmelidir.

7. Hedef Ortam

Doku ve kan ile doğrudan temas halinde kullanılır.

8. Hedef Hasta Popülasyonu

Tüm yaş grupları.

9. Aksesuarlar ve Diğer Cihazlar Hakkında Bilgiler

Turnike Setler cerrahi kanüllerle birlikte kullanılabilir.

Kanülasyon Turnike Set cerrahi iplik ile birlikte kullanılır.

10. Malzeme

KANÜLASYON TURNİKE SET: PVC, Paslanmaz Çelik.

VASKÜLER TURNİKE SET: PVC, Pamuk, PP.

11. Endikasyonlar

TURNİKE SET bir damardan akışı sınırlamak veya kısıtlamak istenen cerrahi prosedürlerde endikedir.

12. Kontrendikasyon

TURNİKE SET PVC, PP, pamuk, ve paslanmaz çelik bileşenlerine karşı aşırı duyarlılığı bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

13. Artık Risk

Bıçakçılar Risk Yönetimi Ekibi tarafından gerçekleştirilen risk analizine göre, kalan riskin makul olarak mümkün olduğu kadar olduğu belirlenir.

14. Kullanım Önerileri

- Aseptik teknik ile Turnike Setini ambalajından çıkartın.
- Hortumu kısaltmak için çengeli çıkarın ve aseptik olarak turnike hortumunu istenilen uzunlukta kesin. Çengeli tekrar hortumun içine yerleştirin.

KANÜLASYON TURNİKE:

- Ameliyat ipliğini kanülasyon bölgesine yerleştirdikten sonra ucunu çengele geçirin.
- Çengeli hortum boyunca geriye doğru çekin.
- İstenen gerginliğe geldiğinde el ile kontrol edin ve ucunu bir hemostat ile klemplayerek sabitleyin. Damarda uygulanan kanülü çıkarırken, kanül ve hortum etrafındaki ameliyat ipliklerini kesin, klempini açın ve hortum çekerek ameliyat ipliklerini çıkarın.
- Kullanılan cihazları uygun bir şekilde imha edin.

VASKÜLER TURNİKE:

- Turnikeyi kanül takılmış damarın etrafına yerleştirin ve çengele geçirin.
- Çengeli ve turnikeyi hortum boyunca çekin ve turnikeyi çengelden ayırın.
- Turnikeyi bir elinizle gerdirirken, hortumu turnikeden aşağı doğru kaydırın. Gerekli gerginlik sağlandığında, tıkaçı hortumu içine itin.
- Tıkaçın iyice yerleşmiş olduğundan ve turnikenin gerekli gerginliği sağlandığından emin olun
- Artan turnike malzemesini hortumun arka ucuna sarın ve malzemeyi sabitlemek için tıkaç üstündeki yırtaktan geçirin.
- Turnikeyi çıkartmak için, artan malzemeyi çıkarıp çözün, hortumu tıkaçtan çıkarın ve turnike boyunca kaydırın.
- Turnike ve hortumu uygun biçimde imha edin.

UYGULAMA SIRASINDA

- Damarın kontrollü tıkanmasını sağlamak için ilmeğe kademeli olarak gerilim uygulayın.
- Etkili hemostaz sağlamak için gerekli minimum gerilimi kullanın.
- Stabil tıkanmayı sağlamak için TURNİKE'yi sabitleme mekanizmasını kullanarak yerine sabitleyin.

- Kanama kontrolünü değerlendirerek tıkanmanın etkinliğini sürekli olarak doğrulayın.
- Tıkanma süresi boyunca damarın ve çevresindeki dokuların durumunu izleyin.
- Klinik olarak ilgili olduğu durumlarda distal perfüzyonu değerlendirin.
- Uzun süreli iskemiyi önlemek için tıkanma süresini düzenli olarak değerlendirin.

TIKANMANIN AÇILMASI

- Hızlı açılma klinik olarak gerekli olmadıkça, tıkanmayı kontrollü ve kademeli bir şekilde açın.
- Reperfüzyon sırasında damarı ve cerrahi alanı anormal kanama veya reaksiyonlar açısından gözlemleyin.

15. Uyarılar

- Ürünü kullanmadan önce hasar tespiti açısından inceleyiniz. Üründeki herhangi bir hasar (örn., kıvrılma, eğilme, şekil bozukluğu ya da kesik) kullanım sırasında akışın engellenmesine ya da bozulmasına neden olabilir ve ürün performansını etkileyebilir. Hasarlı ürünü kullanmayınız.
- Eğer paket hasar görmüşse, cihazın sterilizasyonu bozulabileceğinden kullanmayınız.
- Ürünün kullanımında aseptik teknik uygulayınız.
- Hata olasılığına karşı yedek ürün bulundurunuz.
- Turnike için cerrahi bandı uygun gerginlikte tutun. Aşırı kuvvet uygulanması cerrahi bandın kopmasına neden olabilir.
- Uygulama sırasında aşırı kuvvet uygulanması, telin açılmasına veya ucunun kopmasına neden olabilir. Kullanım süresince ürünün bütünlüğünü kontrol edin.
- Ürün tek kullanımlıktır ve yalnız bir hastada kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ürün vücut sıvıları, diğer sıvılar ve gazlar ile temas halindedir. Tekrar kullanımı durumunda çapraz kontaminasyona, enfeksiyona ve sepsise neden olabilir. Tekrar steril etmeyiniz.
- Aşırı çekme kuvveti uygulamayın, çünkü bu damar yaralanmasına veya çevredeki dokulara zarar verebilir.
- Önerilen oklüzyon süresini aşmayın, çünkü uzun süreli oklüzyon iskemiyi ve doku hasarına yol açabilir.
- Oklüzyon basıncını kademeli olarak ve yalnızca etkili hemostaz sağlamak için gerekli olan ölçüde uygulayın.
- Kalsifiye, kırılan veya hastalıklı damarlarda dikkatli olun, çünkü etkili oklüzyon sağlanamayabilir.
- Oklüzyonun hızlı bir şekilde serbest bırakılması ani reperfüzyona ve buna bağlı fizyolojik etkilere neden olabilir.
- Oklüzyon sırasında damarı ve çevredeki dokuları sürekli olarak izleyin.

- Gerilim uygulamadan önce turnikenin damar çevresinde doğru konumlandırıldığından emin olun.
- Klinik olarak gerektendirilmedikçe, kırılan, diseksiyonlu veya yaygın olarak hastalıklı damarlar da dahil olmak üzere, bütünlüğü ciddi şekilde bozulmuş damarlarda cihazı kullanmayın.

16. Advers Olaylar ve Komplikasyonlar

Hemostaz, damar duvarının zarar görmesi, hemodinamik değişimler.

17. İstenmeyen Yan Etkiler

Bölgesel damar hasarı.

18. Dikkat

Nöropatilerde, kırılan vasküler yapılarda, sistemik lupus eritematozus, alta yatan pıhtılaşma bozuklukları ve kaşektik hastalarda turnike kullanımı dikkatle yapılmalıdır.

19. Paketleme ve Taşıma

Birincil paket, tel, tıpa, boru ve cerrahi örgülü banttan oluşan ve kullanıma hazır steril paketlenmiş bir Turnike Setinden oluşur.

20. Beklenen Klinik Faydalar

TURNİKE SET kullanımı cerrahide kansız bir alan oluşturmayı sağlar.

21. Performans Gereksinimleri ve Sınırlamaları

VASKÜLER TURNİKE SET gerekli olan en kısa süre boyunca kullanıldığından emin olmak için izlenmelidir. 2 saatten fazla turnike kullanılması tavsiye edilmez , çünkü bu iske mi süresinden sonra turnike etkileri bölgede ilerleyici venöz asidoz meydana gelir. KANÜLASYON TURNİKE SET Kardiyopulmoner baypas ameliyatı sırasında 6 saat kullanılabilir.

22. Cihazın İmha Edilmesi

Ürün kontamine tıbbi atık olarak atılmalıdır.

23. Ciddi Olaya İlişkin Bildirim

Cihaz ile ilgili olarak meydana gelecek her türlü ciddi olay, Bıçakçılar'a ve kullanıcının ve/veya hastanın yerleşik olduğu Üye Devleti muhabir yetkili makamına bildirilmelidir.

24. Temel UDI-DI

8695476DP330050RY

25. Raf Ömrü

Cihazın raf ömrü 5 yıldır.

26. Depolama

Cihaz, orijinal ambalajında 5°C - 35°C arasında bir sıcaklıkta saklanmalıdır. Güneş ışığına doğrudan maruz kalmaktan koruyun. Uygun saklama koşulları altında, cihaz etikette belirtilen son kullanma tarihine kadar kullanılabilir.

EN INSTRUCTIONS FOR USE

1. Description

Tourniquet Set is sterile and single use medical device that has 2 different model. CANNULATION TOURNIQUET SET consists of snare and tubing. It is used to secure a cannula. VASCULAR TOURNIQUET SET consists of snare, plug, tubing, and surgical braided tape. It is used to limit or restrict flow through a vessel.

2. Disclaimer of Liability

TOURNIQUET SET is not intended for use other than indicated in the instructions for use. The manufacturer is not responsible for problems arising from inexperience or improper use.

3. Technical Specification

The red and blue color tubes are X-ray detectable due to the radio-opaque properties of the raw material.

References	Dimension	Type of Tourniquet	Radio-Opaque Feature	Snare	Tubes (pcs x color)
330 0510 1	Tube diameter: 3.0x4.1 mm Tube length: 18 cm Snare length: 25 cm	Cannulation	Yes	2	4 x RED, 2 x BLUE, 2 x CLEAR
330 0511 1			Yes	1	1 x RED, 1 x BLUE, 3 x CLEAR
330 0512 1			Yes	2	1 x RED, 2 x BLUE, 5 x CLEAR
330 0513 1			Yes	1	1 x RED, 2 x BLUE, 3 x CLEAR
330 0514 1			Yes	1	5 x RED
330 0515 1			Yes	2	2 x RED, 2 x BLUE, 4 x CLEAR
330 0516 1			Yes	1	2 x RED, 1 x BLUE
330 0517 1			Yes	1	3 x CLEAR
330 0518 1			Yes	1	1 x RED, 1 x BLUE
330 0519 1			Yes	1	2 x RED, 2 x BLUE, 1 x CLEAR
330 0520 1			Yes	1	2 x RED, 2 x BLUE
330 0521 1			Yes	1	2 x RED, 2 x BLUE, 2 CLEAR
330 0531 1	Tube diameter: 3.0x4.1 mm Tube length: 12.5 cm Snare length: 18 cm	Cannulation	Yes	2	1 x RED, 3 x CLEAR, 2 BLUE
330 0532 1	Tube diameter: 3.0x4.1 mm and 4.0x5.0 mm Tube length: 18 cm		Yes	1	1 x RED, 2 x BLUE, 3 x CLEAR
330 0541 1	Tube diameter: 3.0x4.1 mm and 4.0x5.0 mm Tube length: 18 cm		Yes	2	2 x RED, 2 x BLUE, 4 x CLEAR
330 0542 1	Tube diameter: 4.0x5.0 mm Tube length: 18 cm Snare length: 25 cm		No	1	3 x CLEAR
330 0543 1	Tube diameter: 3.6x5.33 mm Tube length: 18 cm		No	-	4 x CLEAR
330 0544 1	Tube diameter: 3.0x4.1 mm and 4.0x5.0 mm Tube length: 18 cm		No	-	8 x CLEAR
330 0610 1	Tube diameter: 4.8x6.8 mm Tube length: 12.5 cm		No	-	5 x CLEAR
330 0710 1	Tube diameter: 3.0x4.1 mm Tube length: 18 cm Snare length: 25 cm		Yes	2	2 x RED, 2 x BLUE, 4 x CLEAR
330 0590 1	Tube length: 13 cm	Vascular	No	-	2 TUBES
330 0591 1			No	1	1 TUBE
330 0592 1			No	1	5 TUBES
330 0593 1			No	-	1 TUBE
330 0594 1			No	-	5 TUBES
330 0841 1	Tube diameter: 4.8x6.8 mm Tube length: 15 cm	Cannulation	No	-	5 x CLEAR

4. Mode of Action

TOURNIQUET SET controls blood flow by applying circumferential pressure, compressing the underlying tissues and blood vessels. This pressure occludes arteries and veins, effectively stopping blood flow to the area distal to the tourniquet.

5. Intended Use

VASCULAR TOURNIQUET SET is used in a surgical procedure to secure a cannula or to limit or restrict flow through a vessel. CANNULATION TOURNIQUET SET is used to secure a cannula within such vessel in cardiopulmonary bypass surgeries.

6. Intended User

The product is designed to be used by specialist doctors. Proper surgical procedure and technique is the responsibility of the attending medical professional (physician). This guideline is furnished for informational purposes only. Each doctor must evaluate the appropriate use of this device, case by case, based upon medical training, experience and the type of surgical procedure employed.

7. Intended Environment

It is used in direct contact with tissue and blood.

8. Intended Patient Population

All ages.

9. Information on Accessories and Other Devices

Tourniquet Sets can be used with surgical cannulas.

The Cannulation Tourniquet Set is used with surgical sutures.

10. Material

CANNULATION TOURNIQUET SET: PVC, Stainless Steel.

VASCULAR TOURNIQUET SET: PVC, Cotton, PP.

11. Indications

TOURNIQUET SET is indicated in the surgical procedures where it is desired to limit or restrict flow through a vessel.

12. Contraindications

TOURNIQUET SET should not be used in patients with known hypersensitivity to PVC, PP, Cotton, stainless steel components.

13. Residual Risk

According to the risk analysis carried out by the Bıçakçılar Risk Management Team, the residual risk is determined to be as far as reasonably possible.

14. Recommendations For Use

- Remove the Tourniquet Set from the packaging with aseptic technique.
- To shorten the tubing, remove the snare and aseptically crop the tourniquet tubing to desired length. Reinsert snare into the tubing.

CANNULATION TOURNIQUET:

- Place the surgical sutures around the cannulation area.
- and hook around the wire snare.
- Pull snare through the tube.
- Check if the required tension is obtained and clamp the suture end with a hemostat.
- To remove the cannula applied on a vessel, cut the sutures around the vessel, open the clamp and remove the sutures while pulling the tube.
- Discard the tourniquet and the tube properly.

VASCULAR TOURNIQUET:

- Position tourniquet around cannulated vessel and hook tourniquet with snare.
- Pull snare and tourniquet through tube and unhook tourniquet from snare.
- While applying tension to tourniquet, with one hand, slide tubing down the tourniquet. Once desired tension has been applied, push retaining plug into tube.
- Make sure that retaining plug is well seated and tourniquet is applying desired tension.
- Wrap excess tourniquet material around end of tube and cinch through slot in retaining plug to hold material securely.
- To remove tourniquet, release and unwrap excess material, unplug tube and slide off tourniquet.
- Discard the tourniquet and the tube properly.

DURING THE APPLICATION

- Apply tension gradually to the loop to achieve controlled occlusion of the vessel.
- Use the minimum tension necessary to achieve effective hemostasis.
- Secure the TOURNIQUET in position using the fixation mechanism to maintain stable occlusion.
- Continuously verify the effectiveness of the occlusion by assessing bleeding control.
- Monitor the condition of the vessel and surrounding tissues throughout the occlusion period."
- Assess distal perfusion where clinically relevant."
- Regularly evaluate the duration of occlusion to avoid prolonged ischemia.

RELEASE OF OCCLUSION

- Release the occlusion in a controlled and gradual manner, unless rapid release is clinically required.
- Observe the vessel and surgical field during reperfusion for any abnormal bleeding or reactions.

15. Warnings

- Inspect the product for damage prior to use. Damage to the product (i.e., kink crimps, distortions or cuts) may result in obstruction or disruption of flow during use and product performance may be affected. Do not use damaged product.
- If the packaging is damaged, do not use as sterility of the device may have been compromised.
- Use aseptic techniques during the procedure.
- A spare product must always be available during operation.
- Make sure that surgical tape is at appropriate stress. Excess force may tear the surgical tape apart.
- Excessive force during the application may lead to deformation on the wire or separation of the stylet tip. Check the product integrity during the procedure.
- The product is produced for single use and for single patient use only: the product comes in contact with human blood, body fluids, liquids or gases.
- Re-sterilization of the product may negatively affect the product performance. Therefore, reuse on other patients may cause cross-contamination, infection and sepsis. Do not resterilize.
- Do not apply excessive traction, as this may result in vascular injury or damage to surrounding tissues.
- Do not exceed the recommended occlusion duration, as prolonged occlusion may lead to ischemia and tissue damage.
- Apply occlusion pressure gradually and only to the extent necessary to achieve effective hemostasis.
- Use caution in calcified, fragile, or diseased vessels, as effective occlusion may not be achieved.
- Rapid release of occlusion may cause sudden reperfusion and associated physiological effects.
- Monitor the vessel and surrounding tissues continuously during occlusion.
- Ensure correct positioning of the tourniquet around the vessel before applying tension.
- Do not use the device on vessels with severely compromised integrity, including fragile, dissected, or extensively diseased vessels, unless clinically justified.

16. Adverse Events and Complications

Hemostasis, Vascular wall damage, and hemodynamic changes.

17. Undesirable Side Effects

Local vessel injury.

18. Caution

Use of tourniquets in neuropathies, fragile vascular structures, systemic lupus erythematosus, underlying coagulation disorders, and cachectic patients must be done with caution.

19. Packaging and Transportation

The primary package consists of snare, plug, tubing, and surgical braided tape. It comprises a ready-to-use sterile packaged Tourniquet Set.

20. Expected Clinical Benefits

The use of the TOURNIQUET SET helps to secure the cannulas, to sign the veins and to create a bloodless field in surgery.

21. Performance Requirements and Limitations

VASCULAR TOURNIQUET SET must be monitored to ensure it is used for the shortest time necessary. It is not recommended to use a tourniquet for more than 2 hours since after this time of ischemia, progressive venous acidosis will occur in the region the tourniquet effects.

CANNULATION TOURNIQUET SET can be used for 6 hours during cardiopulmonary bypass surgery.

22. Disposal of The Device

The product should be discarded as contaminated medical waste.

23. Notice Regarding Serious Incident

Any serious incident that will occur in relation to the device should be reported to Biçakçılar and the correspondent competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

24. Basic UDI-DI

8695476DP330050RY

25. Shelf Life

The shelf life of the device is 5 years.

26. Storage

The device is recommended to be kept in its original packaging and stored at a temperature between 5°C - 35°C until use. Protect from direct exposure to sunlight. Under proper storage conditions, the device may be used up to the expiry date indicated on the label.

REF

- Referans Numarası
- Catalogue number



- Tekrar steril etmeyiniz
- Do not resterilize

LOT

- Lot Numarası
- Batch code

UDI

- Tekil cihaz tanımlayıcısı
- Unique device identifier



- Üretim tarihi
- Date of manufacture



- Paket hasarlıysa kullanmayınız ve kullanım talimatlarına bakınız
- Do not use if package is damaged and consult instruction for use



- Son kullanma tarihi
- Use-by date/ Expiration date



- Üretici
- Manufacturer



- Tek steril bariyer sistemi
- Single sterile barrier system

MD

- Tıbbi Cihaz
- Medical device

CE 0044

- TÜV NORD tarafından CE Sertifikalı.
- CE Certified by TUV NORD.

STERILE EO

- Etilen oksit kullanılarak sterilize edilmiştir
- Sterilized using ethylene oxide



- Kullanım talimatlarına bakınız
- Consult instructions for use



- Tekrar kullanmayınız
- Do not re-use



- Gn ışığından koruyunuz
- Keep away from sunlight



- Kuru yerde muhafaza ediniz
- Keep dry



- Sıcaklık limiti
- Temperature limit



- Dikkat
- Caution

RADYO-OPAK RADIO-OPAQUE

- Radyo opak (Vaskler turnike setler radyoopak deęildir. Dięer turnike setlerde kullanılan mavi ve kırmızı hortumlar radyoopak, řeffaf hortumlar radyoopak deęildir.)
- Radio-opaque (Only red and blue color tubes are radiopaque. Radio-opaque feature of devices are indicated in Section - Technical Specification.)



BİÇAKCILAR

TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Fabrika – Genel Merkez / Factory – Headquarters

(Teknik Servis / Technical Service)

Osmangazi Mahallesi, Gazi Caddesi, No: 21

Esenyurt 34522 İstanbul, Türkiye

T : +90 212 689 02 20

E : info@kocmedical.com

Marmara Bölge / Marmara Region

Ünalan Mahallesi, Çağla Sokak, Çamlıca İş Merkezi, B Blok, No:11

Üsküdar 34700 İstanbul, Türkiye

T: +90 216 285 05 00

E: info@kocmedical.com

www.kocmedical.com